


FITXA INFORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PREVENCIÓ DE LESIONS DURANT LA UTILITZACIÓ D'INSTRUMENTS TALLANTS I PUNXANTS

H-26

Abans de la utilització d'instruments tallants i punxants:

- Comprove que l'equip necessari per a realitzar la tècnica estiga disponible i a l'abast de la mà (inclosos equips de protecció personal, contenidor de residus...). Mantinga la zona neta i ordenada.
- En cas d'utilitzar un dispositiu amb mecanisme de seguretat, informe's de la classe de mecanisme de seguretat i quina és la manera d'activar-lo.
- Informe al pacient i acompanyants, si escau, del procediment que es realitzarà, de la importància de seguir les indicacions del professional i estiga atent als moviments inesperats sobretot en pacients pediàtrics.

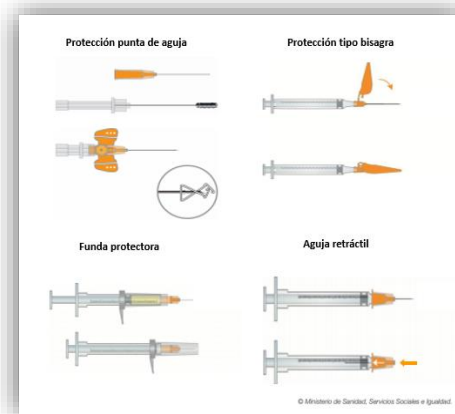

Durant l'ús: Manege amb extraordinària cura les agulles i els instruments tallants i punxants.



- PROHIBIT reencaputxar els instruments que poden tallar i punxar (agulles, bisturís, etc.). No separe les agulles de la xeringa per a la seua eliminació en el contenidor ni les manipule.
- Immediatament després de l'ús, active el sistema de bioseguretat.
- RECORDE!

Un dispositiu amb mecanisme de seguretat passiva no requereix activació per part seua, però si l'activació és necessària, ha d'assegurar-se d'accionar-la utilitzant una sola mà i mantenint totes dues mans darrere de la part que talla o punxa exposada.



L'activació del mecanisme de seguretat es manifesta mitjançant un senyal auditiu, tàctil o visual.

Després de l'ús:

- a) Elimine els objectes en envasos resistents a la punció que han d'estar localitzats en la zona en la qual seran utilitzats.



- b) Deposite el material personalment en el recipient adequat. Ha de respectar el límit d'ompliment del contenidor de residus (senyalitzat en el recipient). El contenidor mai s'ha d'omplir totalment, ja que les agulles que sobreixen dels contenidors constitueixen un risc important per a les persones que les manegen. Aquests contenidors compten amb un tancament provisional de seguretat i un tancament definitiu.



- c) Quan transporte el contenidor d'un lloc a un altre, que no siga el seu emmagatzematge temporal intracentres, siga amb carro de medicació o en bat, assegure la seua estabilitat i procedisca al tancament provisional d'aquest per a evitar així que el material que es troba a l'interior isca accidentalment d'aquest, amb el consegüent risc de punxada.
- d) Mai deixe objectes tallants o punxants abandonats sobre una superfície (damunt del llit del pacient, del carro de material, etc.), ni sobre recipients que no siguen els específics de deixalla d'aquests. Tinga especial cura en què no hi haja objectes tallants/punxants entre la roba i/o en les butxaques que s'envia a bugaderia. Ha de conèixer i complir els procediments de gestió de residus vigents al seu centre de treball.
- e) En cas d'accident per burxada, tall o esquixada, comuniqui-ho al seu immediat superior jeràrquic. Actue segons el Protocol d'actuació enfront d'exposicions accidentals a malalties de transmissió sanguínia (VIH, VHC, VHB): [H-05 Actuació en cas d'exposició biològica \(v.02\)](#).

Font: Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari. Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.